



## MERCATOR lateks

Naslednja navodila je treba uporabljati skupaj s podrobnimi informacijami na embalaži.

### Kratek opis izdelka

Zaščitne rokavice iz lateksa, pudrane, nesterilne, za enkratno uporabo, minimalna nevarnost

### Celoten opis izdelka

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Referenčna številka:       | : RP11001001-05                                  |
| Surovina                   | : lateks   |
| Manšeta                    | : zvit   |
| barva                      | : krema  |
| oblika                     | : obojestranski, se prilaga obema rokama         |
| Velikosti                  | : XS (5-6), S (6-7), M (7-8), L (8-9), XL (9-10) |
| Embalaža v razsutem stanju | : 100 kosov glede na težo                        |
| Rok veljavnosti            | : 5 let (od datuma proizvodnje)                  |

### Navodila za shranjevanje

Prilagodljivo je, da rokavico hranite na suhem mestu, pri temperaturi 5-35°C in jo zaščitite pred sončno svetlobo in fluorescenčno svetlobo.

Rokavice je treba zaščititi pred vlago.

Rokavice imejte na razdalji najmanj 1 m od grelnih naprav, virov ognja in ozona.

Ne shranjujte v neposredni bližini topil, olj, goriv ali masti.

### Stik s hrano

Rokavice, označene s piktogramom, ki označuje odobritev stika

s hrano, v skladu z Uredbo (ES) št. 10/2011,

Uredba (ES) št. 1935/2004 in Uredba (ES) št. 2023/2006 o dobri proizvodni praksi. Rokavice primerne za stik z vsemi vrstami hrane, razen kisle hrane,

testirano v skladu z EN 1186 Global Migration Test:

| Pogoji ekstrakcije<br>(40°C 30 min.) | Rezultati analize<br>[mg/dm <sup>2</sup> ] | Rezultat testa<br>(mejna vrednost < 10 mg/dm <sup>2</sup> ) |
|--------------------------------------|--|---|
| 10% etanol                           | 5.0  | Izpolnjuje  |

### Klasifikacija osebne zaščitne opreme in skladnost s standardi

Rokavice, razvrščene kot osebna zaščitna oprema  
– kategorija I za minimalno tveganje, v skladu z Uredbo 2016/425.

Skladnost s standardi: EN 420:2003+A1:2009.

Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani: [https://mercatormedical.eu/produky/rekawice/Gospodarcze\\_i\\_ochronne/mercator-latex](https://mercatormedical.eu/produky/rekawice/Gospodarcze_i_ochronne/mercator-latex)



### Aplikacija

Nesterilne zaščitne rokavice, ki se uporabljajo za higienska in sanitarna dela na javnih mestih, za vzdrževanje čistoče v objektih, pomožnih prostorih in na domu, storitve profesionalnega čiščenja s čistilnimi sredstvi s šibkim delovanjem in z lahko reverzibilnimi učinki, vrtnarjenje, poljedelstvo, predelava hrane in stik z živali, za uporabo v mehanskih obratih, kjer obstaja nevarnost le površinskih poškodb zaradi mehanskega vpliva, in za gospodinjstva dela.

Razvrščeno kot osebna zaščitna oprema kategorije I

na minimalno tveganje. Njihov dizajn in označevanje izpolnjujeta zahteve Uredbe 2016/425 o osebni zaščitni opremi. Rokavice uporabljajte samo za predvideni namen.

### Indikacije za uporabo

Preden si nadenete rokavice, je priporočljivo temeljito posušiti kožo rok.

Pred uporabo rokavic preverite morebitne pomanjkljivosti. Če med uporabo pride do vboda, razpoke ali raztrganine, takoj zamenjajte rokavice. Izogibajte se rokavicam, ki so umazane od znotraj -

ti lahko povzročijo draženje, ki povzroči dermatitis ali resnejšo poškodbo. Rokavic ne smete uporabljati v stiku z odprtim ognjem ali za zaščito pred kakršnim koli ostrim orodjem.

Rokavice niso namenjene varjenju, zaščiti pred električnim udarom, ionizirajočim sevanjem ali izpostavljenosti hladnim in vročim predmetom.

### Nevarne sestavine/sestavine

Nekatere rokavice lahko vsebujejo sestavine, ki povzročajo pojav alergije pri ljudeh, ki so alergični nanje, pri katerih lahko pride do stika draženje in/ali alergijske reakcije. Gumijaste rokavice iz lateksa naravnih izdelki lahko povzročijo alergijske reakcije, vključno z reakcijami anafilaktični. Če se pojavi alergijska reakcija, morate:

**takoj poiščite zdravniško pomoč.**

### Uporaba

Uporabljene rokavice je treba odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi o ravnanju z odpadki.

### Proizvajalec







































MERCATOR MEDICAL SA

ulica H. Modrzejewska 30






31-327 Krakov, Poljska

[www.mercatormedical.eu](http://www.mercatormedical.eu)

## Piktogrami, ki se lahko pojavijo na embalaži

|   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|    | izdelek je artikel medicinski   |    | izdelek je sredstvo osebna zaščita                              |    | označevanje napudranih rokavic   |
|    | izdelek za enkratno uporabo   |    | zaščititi pred vlago  |    | označevanje rokavic brez pudra   |
|    | nesterilen izdelek  |    | zaščititi pred sončno svetlobo                                  |    | označevanje prevlečenih rokavic znotraj s polimerno plastjo                    |
|    | kodo serije, ki jo dodeli proizvajalec  |    | hranite pri 5-35°C  |    | označevanje rokavic, ki so znotraj prekrite s kozmetičnim in negovalnim slojem |
|    | kataloško številko, ki jo dodeli proizvajalec   |    | ščiti pred ozonom   |    | označevanje rokavic z zunanjo teksturo   |
|    | pooblaščenega zastopnika v Evropski skupnosti morata simbol spremljati ime in naslov pooblaščenega zastopnika |    | datum proizvodnje   |    | rokavice iz nitrila  |
|    | Datum veljavnosti   |    | Proizvajalec, simbol mora spremljati ime in naslov proizvajalca |    | rokavice iz vinila   |
| <br><small>ISO 374-5:2016</small>                | zaščita pred mikroorganizmi   |    | rokavice primerne za stik z živili                              |    | rokavice iz naravnega lateksa  |
| <br><small>VIRUS<br/>ISO 374-5:2016</small>    | zaščita pred mikroorganizmi in virusi   |  | za recikliranje   |  | določitev števila kosov glede na uteži   |
| <br><small>UVWXYZ<br/>ISO 374-1/Type A</small> | kemično odporne rokavice tipa A (šest testiranih kemikalij naj bo označenih s črko pod piktogramom)           |  | embalažo lahko obravnavamo kot komunalni odpadke                |  | določitev števila kosov glede na uteži   |
| <br><small>XYZ<br/>ISO 374-1/Type B</small>    | kemično odporne rokavice tipa B (tri testirane snovi kemikalije morajo biti označene črka pod piktogramom)    |  | glejte navodila za uporabo                                      |  | določitev števila kosov glede na uteži   |
| <br><small>ISO 374-1/Type C</small>            | kemično odporne rokavice tipa C   |  | dodatne informacije na notranji strani pakiranja                |  | kakovost rokavic ni zagotovljena v primeru poškodbe embalaže                   |
|    | znak skladnosti z zahtevami ruskega trga  |  | znak skladnosti z zahtevami ukrajinskega trga                   |   |  |

## Kako nadeti rokavice

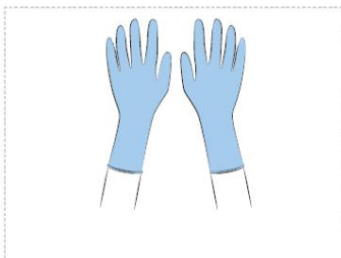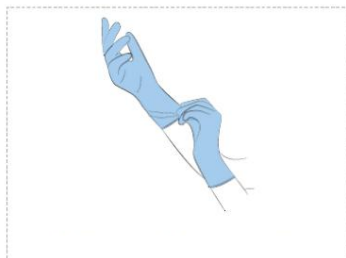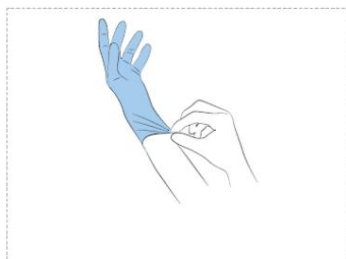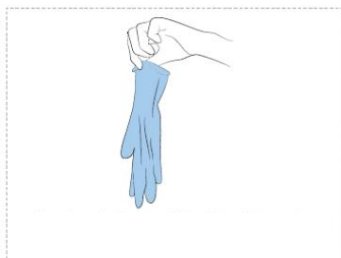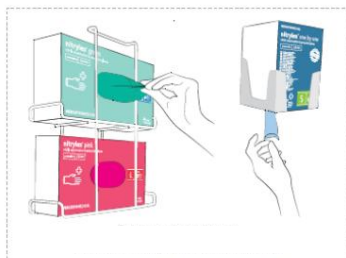

## Kako sneti rokavice

